

Materiallista

Bilaga till "Praktisk vägledning vid trakeostomi och hemventilatorvård"

Produkter från Hjälpmedelcentralen för medicinsk apparatur i hemmet, MAH: Ring hjälpmedelcentralen för beställning

Produkter från Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH: Beställs av sjuksköterska på vårdcentral eller ASIH

Kontaktuppgifter

Medicinsk apparatur i hemmet, MAH

Tel: 08-123 675 00

hjmsmah.sls@sl.se

Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH:


Tel: 08-123 366 50




<http://www.fhh.sll.se/>


Vid frågor ring Nationellt Respirationscentrum, 08-123 551 10, telefontid må-fre 8.30-9.30





Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av flera gånger per dag.



Uppdaterad 210610




TRAKEALVÅRD KOMPRESSER Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Trakealkompress 7,5x10cm Vitri	FHH Art.nr: 810222 Vitri Medical	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Metalline 23094, Mesoft 155030	
Trakealkompress Cellosoft 7,5x10cm	FHH Art.nr: 1055160 Mediq Sverige AB	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Metalline 23094, Mesoft 155030	
Trakealkompress 10x10cm Medicomp	FHH Art.nr: 421535 Paul Hartmann AG	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb		
Trakealkompress foam antiseptisk stl 8,8cm X 7,5cm tjock 5mm m utskick	FHH Art.nr: 55535PAMDX Medtronic AB	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Permafoam 409426	
Polyuretanförband för dränage/sonder/trakeostomi 8,9x8,9cm Tegaderm	FHH Art.nr: 90604 3M Svenska AB	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Permafoam 409426	
Häfta papper Micropore vit 2,5cmx9,1m hållare 12st/frp	FHH Art.nr: 1535-1 3M Svenska AB	Tvättas ej	Ta ny tejp för varje användning		




TRAKEALVÅRD NACKBAND Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk appatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Nackband till Trachealkanyl S, 34cm barn	FHH Art.nr: 551 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	bytes 1 gång/vecka samt vid behov		
Nackband till Trachealkanyl L, 47cm vuxen	FHH Art.nr 552 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Nackband till Trachealkanyl XL, 59cm vuxen	FHH Art.nr: 553 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Nackband till Trachealkanyl Neckfix Beige 46 cm (motsvarar de tidigare blåa nackbandet 16 cm)	FHH Art.nr: 32622 Fahl Scandinavia AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov	Blå nackband till trakealkany	
Nackband till trachealkanyl Neckfix Beige 50 cm (motsvarar de tidigare blåa nackbandet 28 cm)	FHH Art.nr: 32623 Fahl Scandinavia AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov	Blå nackband till trakealkany	







TRAKEALVÅRD RENGÖRING AV TRAKEOSTOMA Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artiklar	Bild
Nonwovenkompress hög-ren dispenserbox, 4-lag 7,5x7,5cm	FHH Art.nr: 223002 AST Medical AB	Tvättas ej	Engångs, kastas efter användning		





TRAKEALVÅRD RENGÖRING AV INNERKANYL Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Nonwovenkompress hög-ren dispenserbox, 4-lag 7,5x7,5cm	FHH Art.nr: 223002 AST Medical AB	Tvättas ej	Engångs, kastas efter användning		
Rengöringsborste för rengöring av rensrör.	FHH Art.nr: 100/855/000CZ Smiths medical Sverige AB	Används främst till rengöring av rensrör	Bytes dagligen*	Rengöringsborste 100/855/000	
TRAKEALVÅRD KUFF Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Spruta injektion 3-komponent luer 10 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 4616103V Braun Medical AB	Tvättas ej	Bytes 1 gång/vecka.Om kuff med sterilt vatten har man två sprutor en för ikuffning och en för urkuffning. Vid luftkuff används en spruta till både i och urkuffning.		
Steriltvatten 10 ml för kuffning	Köps i nuläget på på apotek	Ta alltid nytt sterilt vatten vid kuffning			


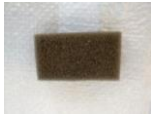

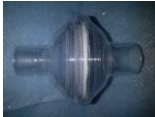

TRAKEALVÅRD Sugkanal Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparat i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Spruta injektion 3-komponent luer 10 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 4616103V Braun Medical AB	Skölj igenom med kranvatten efter användning och låt torka	Bytes 1 gång/dag		
Spruta injektion 3-komponent luer 20 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 4616200V Braun Medical AB	Skölj igenom med kranvatten efter användning och låt torka	Bytes 1 gång/dag		




TRAKEALVÅRD FUKT/ VÄRMEVÄXLARE Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Fuktvärmväxlare TrachVent vuxna/barn spontanand.	FHH Art.nr: HU-41112 Mediq Sverige Exclusive AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes morgon och kväll samt vid behov.	TrachoPlus 9085,	
Luftfuktare Spiro	FHH Art.nr: 702 Smiths Medical AB	Filtret slängs. Filterhus och lock rengörs med ljummet vatten, oparfymrat handdiskmedel och kompresser morgon och kväll samt vid behov. Lufttorkas.*	Bytes var 14:e dag eller oftare vid behov.		
Filter till Luftfuktare HME m talventil, Spiro	FHH Art.nr: 740 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes dagligen och vid behov.		






TRAKEALVÅRD TALVENTIL Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Talventil med filterfunktion utan syrgasnippel Spiro Förskrivs av NRC	FHH Art.nr: 711 Smiths medical Sverige AB	Filtret slängs. Filterhus rengörs med ljummet vatten, oparfymerat handdiskmedel och kompresser, locket rengörs med ljummet vatten	Bytes var 14:e dag eller oftare vid behov.		
Filter till Luftfuktare HME m talventil, Spiro	FHH Art.nr: 740 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes dagligen och vid behov.		
Fukt/värmeväxlare TrachPhone. Fuktvärmeväxlare med manuell talfunktion	FHH Art.nr: 7704 Atos Medical AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes morgon och kväll samt vid behov.	TrachoPlus 9085, TrachVent HU-41112, Spiro 702.	



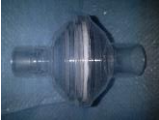


TRAKEALVÅRD SUG- UTRUSTNING Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Vario - Stationär sug	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Behållare töms dagligen och vid behov. Behållare och lock rengörs då med vatten och diskmedel med hjälp av diskborste.*	Behållaren får inte överfyllas.		
Vario Vacuumslang Silikon slang 25cm, 1 st rak hankoppling och 1 st 90 gradersvinklad	MAH Medela medical AB Art.nr. 077.0931	Tvättas ej	Bytes vid behov om synligt trasig eller sliten.		
Clario- Portabel sug	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Behållare töms och rengörs efter användning. Rengörs med vatten och diskmedel med hjälp av diskborste.*	Behållaren får ej överfyllas.		
Överströmningsfilter	MAH Medela medical AB Art. Nr 077.0571	Tvättas ej	bytes 1 gång/månad*		
Sugslang K/N med reglage 5,8x8,3mmx2,1m ch25 hygienfp	FHH Art.nr: E1320210083USM Meteko Instrument AB	Sug vatten igenom slangen efter sugning i trakealkanyl	Bytes 1 gång/dag		
Sugkateter böjd 10 CH 53cm svart	FHH Art.nr: 60871053 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171053-1	
Sugkateter böjd 12 CH 53cm vit	FHH Art.nr: 60871253 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171253-1	
Sugkateter böjd 14 CH 53cm grön	FHH Art.nr: 60871453 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171453-1	






E70 HOSTMASKIN PHILIPS Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
E 70- Hostmaskin	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Torka av med lätt fuktad trasa och oparfumerat handdiskmedel. Ta ut strömkabeln vid rengöring.	Torka av 1 gång/vecka och vid behov		
E 70- Luftinloppsfilter till hostmaskin	Ring MAH så skickar de filter per post.	Rengör varannan vecka med vatten och oparfumerat handdiskmedel. Låt torka helt innan det sätts tillbaka.	Bytes var 6:e månad och vid behov		
E 70- Slangset med anslutning till trakealkanyl och filter (1,8m)	MAH Art.nr: 1090835 Philips AB	Tvättas vid behov. Tvättas med vatten och oparfumerat handdiskmedel, måste vara helt torr före användning.	Bytes 1 gång/månad		
Filter- Vid användnings av hostmaskin (ersätter Fuktvärmeväxlare art: 1855000)	FHH Art.nr: 1341000S Meteko Instrument AB	Tvättas ej	1 gång/dag	Filter PS-6020	
Utdragbar Flexslang 22F--22M/15F, 70mm-150mm	FHH Art.nr: 3504000 Intersrgical	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka. *	3 st i ruljans. Bytes 1 gång/vecka och vid behov. Om patienten har rikligt med sekret kan det behövas fler flextuber i bruk.*	Freeze-flex 9070 Flexslang böjbar Art.nr: 332/5666 Softflex-	




TRILOGY PHILIPS Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Trilogy 100	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Rengör med en lätt fuktad trasa och oparfumerat handdiskmedel. Ta ut strömkabeln vid rengöring.	1 gång/vecka och vid behov		
Trilogy 100 – Luftinloppsfilter Pollenfilter 2-pack mörkgrå	MAH Art.nr: 1029330 Philips AB	Tvättas minst 1 gång/vecka med oparfumerat handdiskmedel och vatten. Låt torka helt innan det sätts	Bytes var 6:e månad och vid behov		
Trilogy 100 – Passiv krets för engångsbruk	MAH Art.nr: 1073228 Låda med 20 st Philips AB	Tvättas ej	Bytes var 14:e dag och vid behov		
Bakteriefilter – närmast maskinen	MAH Art.nr: 342077 Philips AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov. Beställs styckvis. Rekommenderat är att man beställer 6 st åt gången.		
PB 560 Covidien – Smoothbore andningssystem med exhalationvalve	MAH Art.nr: 5183064 Anmedic AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov.		

PB560 COVIDIEN Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparat i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikel	Bild
PB 560 – Covidien	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Rengör med lätt fuktad trasa och oparfumerat handdiskmedel.	Torka av 1gång/vecka och vid behov		
PB 560 Covidien – luftinloppsfilter	MAH, ring så skickar de nya filter på posten.	Tvättas ej	Bytes 1 gång/månad eller vid behov.		
PB 560 Covidien – Smoothbore andningssystem med exhalationvalve	MAH Art.nr: 5183064 Anmedic AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov.		
Bakteriefilter – närmast maskinen	MAH Art.nr: 342077 Philips AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov. Beställs styckvis. Rekommenderat är att man beställer 6 st åt gången.		

TILLBEHÖR VENTILATOR Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Ventilatorbord	MAH Art.nr: 003443 BREAS Medical AB	Endast ett bord per patient förskrivs.			
"Nya älgen" Slanghållare	MAH Art.nr: 150010 Anmedic AB	Dammorkas			
Fukt/värmeväxlare-Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 Timik AB	Tvättas ej	Bytes 1gång/dag och vid behov		
Fukt/värmeväxlare-Humid Vent 2S Flex DC	FHH Art.nr: 17732 Tteleflex MEDICAL	Tvättas ej	Bytes 1gång/dag och vid behov		
Vridbart knä	MAH Art.nr: 1897 Anmedic	Tvättas dagligen med ljummet vatten, oparfumerat handdiskmedel och kompresser.	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		
Vridbart knä med porthatt	MAH Art.nr: 1898 Anmedic AB	Tvättas dagligen med ljummet vatten, oparfumerat handdiskmedel och kompresser.	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		

AEROGEN Artikel	OneMed/Hjälpmiddelscentral Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Nebulisatorkammare Aerogen, enpatients 10 frp	MAH Art.nr: AG-AS3200 Dolema AB	Efter användning nebulisera igenom ca 1ml natriumklorid, skölj sedan med vatten och låt torka.*	Vid användning upp till 4ggr/dag byts kammaren 1 gång/månad vid användning mer än 4ggr/dag byts kammaren var 14:e/dag.		
T-stycke (vuxen) till Aerogen (22M, 22F) 10-pack	MAH Art.nr: AG-AS3010 Dolema AB	Efter användning skölj igenom med vatten och låt torka.*	Byts i samband med byte av nebulisatorkammare.		
Filter- Mellan Aerogen och utandningsventil	FHH Art.nr: 1341000S Meteko Instrument AB	Tvättas ej	1 gång/dag	Filter PS-6020	
Utdragbar Flexslang 22F--22M/15F, 70mm-150mm	FHH Art.nr: 3504000 Intersurgical	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1 gång/vecka. Om patienten inhalerar ofta kan det behövas fler flextuber i bruk.*	Freeze-flex 9070 Flexslang böjbar Art.nr: 332/5666 Softflex-	
Spruta injektion 3-komponent luer 5 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 4616057V Braun Medical AB	Tvättas ej	Byts 1ggr/dag		
Natriumklorid 10 ml	Förskrivs av läkare och hämtas på apotek				

BEFUKTARE FISHER & PAYKEL MR810	Artikelnummer OneMed/Hjälpmiddelscentral	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och	Bild
Fisher & Paykel befuktare MR810	MAH bistår med teknisk support av utrustningen. .		Fuktdammas en gång per vecka.		
Befuktningsskammare vuxna	MAH Art.nr. HC300 Fisher & Paykel Healthcare AB	Koppla bort huvudströmmen. Tvätta med vatten och oparfymerat handdiskmedel en gång per vecka. Sköli noggrant.	Rengör vattenbehållaren med vatten efter varje användning. Slangen mellan ventilatorn och befuktaren skall tvättas en gång per vecka och byts ut		
Uppvärmd slangkrets. Evatherm för MR810	MAH Art.nr. 900MR810 Fisher & Paykel Healthcare AB	Skölj igenom slangen med kranvatten och låt torka.	Sköljs igenom en gång per vecka och byts ut efter sex månader och vid behov.		
Whisper swivel II Utandningsventil	MAH Art.nr: 332113 Philips AB	Skölj igenom med kranvatten och låt torka.	Sköljs igenom en gång per vecka och byts ut efter sex månader, i samband med slangbyte, och vid behov.		
Fukt/värmeväxlare- Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 GE Healthcare	Utan filter.Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka helt innan nästa användning.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1 gång/vecka och vid behov.*		
Utdragbar Flexslang 22F--22M/15F, 70mm-150mm	FHH Art.nr: 3504000 Intersurgical	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka helt innan nästa användning.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1 gång/vecka och vid behov.*	Freeze-flex 9070 Flexslang böjbar Art.nr: 332/5666 Softflex-flexslang Art.nr:10670809	

REVIVATOR/ ANDNINGS-BALONG Artikel	Artikelnummer OneMed/Hjälpmiddelscentral	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Fukt/värmeväxlare-Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 GE Healthcare	Tvättas ej	Bytes efter användning av andningsbalong		
Fukt/värmeväxlare-Humid Vent 2S Flex DC	FHH Art.nr: 17732 Tteleflex MEDICAL	Tvättas ej	Bytes 1gång/dag och vid behov		
Vridbart knä	MAH Art.nr: 1897 Anmedic	Rengörs med oparfymrat handdiskmedel, ljummet vatten och kompresser.*	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		
Andningsballong	NRC förskriver Ambu Spur II från hjälpmiddelscentralen. Denna är patientbunden. Art.nr: 325003000	Tvättas ej	Funktionskontroll dagligen. Förvaras i originalpåse, torkas av efter användning.		

* NRC's riktlinjer