

# Materiallista

## Bilaga till "Praktisk vägledning vid trakeostomi och hemventilatorvård"

Produkter från Hjälpmedelcentralen för medicinsk apparatur i hemmet, MAH: Ring hjälpmedelcentralen för beställning

Produkter från Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH: Beställs av sjuksköterska på vårdcentral eller ASIH

### Kontaktuppgifter

Medicinsk apparatur i hemmet, MAH

Tel: 08-123 675 00

[hjmsmah.sllso@sll.se](mailto:hjmsmah.sllso@sll.se)

Förbrukningshjälpmedel i hemmet, FHH:


Tel: 08-123 366 50




<http://www.fhh.sll.se/>





Vid frågor ring Nationellt Respirationscentrum, 08-123 551 10, telefontid må-fre 8.30-9.30





Övrig tid telefonsvarare som lyssnas av flera gånger per dag.




Uppdaterad 190801






<b>TRAKEALVÅRD KOMPRESSER Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Trakealkompress 7,5x10cm Vitri	FHH Art.nr: 810222 Vitri Medical	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Metalline 23094, Mesoft 155030	
Trakealkompress Cellosoft 7,5x10cm	FHH Art.nr: 1055160 Sverige AB Mediq	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Metalline 23094, Mesoft 155030	
Trakealkompress 10x10cm Medicomp	FHH Art.nr: 421535 Paul Hartmann AG	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb		
Trakealkompress foam antiseptisk stl 8,8cm X 7,5cm tjock 5mm m utskick	FHH Art.nr: 55535PAMDX Medtronic AB	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Permafoam 409426	
Polyuretanförband för dränage/sonder/trakeostomi 8,9x8,9cm Tegaderm	FHH Art.nr: 90604 Svenska AB 3M	Tvättas ej	Bytes morgon och kväll samt vb	Permafoam 409426	
Häfta papper Micropore vit 2,5cmx9,1m hållare 12st/frp	FHH Art.nr: 1535-1 3M Svenska AB	Tvättas ej	Ta ny tejp för varje användning		


<b>TRAKEALVÅRD NACKBAND Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Nackband till Trachealkanyl S, 34cm barn	FHH Art.nr: 551 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	bytes 1 gång/vecka samt vid behov		
Nackband till Trachealkanyl L, 47cm vuxen	FHH Art.nr: 552 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Nackband till Trachealkanyl XL, 59cm vuxen	FHH Art.nr: 553 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Blå nackband till Trachealkanyl 16 cm	FHH Art.nr: 40-0005-033V IM-Medico Svenska AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Blå nackband till Trachealkanyl 28 cm	FHH Art.nr: 40-0005-044V IM-Medico Svenska AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		
Nackband till larynxtub, delbar med plasthakar.	FHH Art.nr: 7668 Atos medical Sverige AB	Tvättas ej	Bytes 1 ggr/vecka samt vid behov		

<b>TRAKEALVÅRD RENGÖRING AV TRAKEOSTOMA Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Nonwovenkompress hög-ren dispenserbox, 4-lag 7,5x7,5cm	FHH Art.nr: 2220002 AST Medical AB	Tvättas ej	Engångs, kastas efter användning		
<b>TRAKEALVÅRD RENGÖRING AV INNERKANYL Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Nonwovenkompress hög-ren dispenserbox, 4-lag 7,5x7,5cm	FHH Art.nr: 2220002 AST Medical AB	Tvättas ej	Engångs, kastas efter användning		
Rengöringsborste för rengöring av rensrör.	FHH Art.nr: 100/855/000CZ Smiths medical Sverige AB	Används främst till rengöring av rensrör	Bytes dagligen*	Rengöringsborste 100/855/000	
<b>TRAKEALVÅRD KUFF Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Spruta injektion 3-komponent luer 10 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 307736 Becton Dickinson AB	Tvättas ej	Bytes 1 gång/vecka.Om kuff med sterilt vatten har man två sprutor en för ikuffning och en för urkuffning. Vid luftkuff används en spruta till både i och urkuffning.		





Steriltvatten 10 ml för kuffning	Förskrivs av läkare och hämtas på apotek	Ta alltid nytt sterilt vatten vid kuffning			
<b>TRAKEALVÅRD FUKT/ VÄRMEVÄXLARE Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Fuktvärmväxlare TrachVent vuxna/barn spontanand.	FHH Art.nr: HU-41112 Mediq Sverige Exclusive AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes morgon och kväll samt vid behov.	TrachoPlus 9085,	
Luftfuktare Spiro	FHH Art.nr: 702 Smiths Medical AB	Filtret slängs. Filterhus och lock rengörs med ljummet vatten, oparfymrat handdiskmedel och kompresser morgon och kväll samt vid behov. Lufttorkas.*	Bytes var 14:e dag eller oftare vid behov.		
Filter till Luftfuktare HME m talventil, Spiro	FHH Art.nr: 740 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes dagligen och vid behov.		

<b>TRAKEALVÅRD</b> <b>TALVENTIL</b> <b>Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apparatur i hemmet</b> <b>Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Talventil med filterfunktion utan syrgasnippel Spiro <b>Förskrivs av NRC</b>	FHH Art.nr: 711 Smiths medical Sverige AB	Filtret slängs. Filterhus rengörs med ljummet vatten, oparfymrat handdiskmedel och kompresser, locket rengörs med ljummet vatten och kompresser morgon och kväll samt vid behov. Lufttorkas.*	Bytes var 14:e dag eller oftare vid behov.		
Filter till Luftfuktare HME m talventil, Spiro	FHH Art.nr: 740 Smiths medical Sverige AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes dagligen och vid behov.		
Fukt/värmeväxlare TrachPhone. Fuktvärmeväxlare med manuell talfunktion	FHH Art.nr: 7704 Atos Medical AB	Tvättas ej	Engångs. Bytes morgon och kväll samt vid behov.	TrachoPlus 9085, TrachVent HU-41112, Spiro 702,	




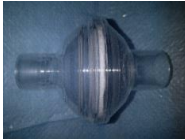

<b>TRAKEALVÅRD SUG- UTRUSTNING Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
Vario - Stationär sug	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Behållare töms dagligen och vid behov. Behållare och lock rengörs då med vatten och diskmedel med hjälp av diskborste.*	Behållaren får inte överfyllas.		
Vario Vacuumslang Silikonslang 25cm, 1 st rak hankoppling och 1 st 90 gradersvinklad	MAH Medela medical AB Art.nr. 077.0931	Tvättas ej	Bytes vid behov om synligt trasig eller sliten.		
Clario- Portabel sug	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Behållare töms och rengörs efter användning. Rengörs med vatten och diskmedel med hjälp av diskborste.*	Behållaren får ej överfyllas.		
Överströmningsfilter	MAH Medela medical AB Art. Nr 077.0571	Tvättas ej	bytes 1 gång/månad*		
Sugslang K/N med reglage 5,8x8,3mmx2,1m ch25 hygienfp	FHH Art.nr: E1320210083USM Meteko Instrument AB	Sug vatten igenom slangen efter sugning i trakealkanyl	Bytes 1 gång/dag		
Sugkateter böjd 10 CH 53cm svart	FHH Art.nr: 60871053 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171053-1	

Sugkateter böjd 12 CH 53cm vit	FHH At.nr: 60871253 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171253-1	
Sugkateter böjd 14 CH 53cm grön	FHH Art.nr: 60871453 Mediplats AB	Tvättas ej	Bytes efter varje sugning i trakealkanyl	60171453-1	













<b>E70 HOSTMASKIN PHILIPS Artikel</b>	<b>Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer</b>	<b>Skötsel och rengöring</b>	<b>Bytesfrekvens/rengöring</b>	<b>Ersätter tidigare produkt och artikelnr</b>	<b>Bild</b>
E 70- Hostmaskin	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Torka av med lätt fuktad trasa och oparfymerat handdiskmedel. Ta ut strömkabeln vid rengöring.	Torka av 1 gång/vecka och vid behov		
E 70- Luftinloppsfilter till hostmaskin	Ring MAH så skickar de filter per post.	Rengör varannan vecka med vatten och oparfymerat handdiskmedel. Låt torka helt innan det sätts tillbaka.	Bytes var 6:e månad och vid behov		
E 70- Slangset med anslutning till trakealkanyl och filter (1,8m)	MAH Art.nr: 1090835 Philips AB	Tvättas vid behov. Tvättas med vatten och oparfymerat handdiskmedel, måste vara helt torr före användning. Eventuellt behövs två stycken slangkretsar i bruk samtidigt. Filtret rengörs ej.	Bytes 1 gång/månad		
Filter- Vid användnings av hostmaskin (ersätter Fuktvärmväxlare art: 1855000)	FHH Art.nr: 1341007S Meteko Instrument AB	Tvättas ej	1 gång/dag	Filter PS-6020	






Flexslang böjbar isokoppling id 15mm/22mm längd 7-16cm veckad insida	FHH Art.nr: 332/5666 Medtronic AB	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka. *	3 st i ruljans. Bytes 1gång/vecka och vid behov. Om patienten har rikligt med sekret kan det behövas fler flextuber i bruk.*	Freeze-flex 9070	
--	---	---	--	------------------	--




TRILOGY PHILIPS Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Trilogy 100	MAH består med teknisk support av utrustningen.	Rengör med en lätt fuktad trasa och oparfymerat handdiskmedel. Ta ut strömkabeln vid rengöring. Torka bort överflödigt rengöringsmedel med en torr, mjuk trasa.	1 gång/vecka och vid behov		
Trilogy 100 – Luftinloppsfilter Pollenfilter 2-pack mörkgrå	MAH Art.nr: 1029330 Philips AB	Tvättas minst 1 gång/vecka med oparfymerat handdiskmedel och vatten. Låt torka helt innan det sätts tillbaka.	Bytes var 6:e månad och vid behov		
Trilogy 100 – Passiv krets för engångsbruk	MAH Art.nr: 1073236 Låda med 20 st Philips AB	Tvättas ej	Bytes var 14:e dag och vid behov		
Bakteriefilter – närmast maskinen	MAH Art.nr: 342077 Philips AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov. Beställs styckvis. Rekommenderat är att man beställer 6 st åt gången.		
PB 560 Covidien – Smoothbore andningssystem med exhalationvalve	MAH Art.nr: 5183064 Anmedic AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov.		

PB560 COVIDIEN Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
PB 560 – Covidien	MAH bistår med teknisk support av utrustningen.	Rengör med lätt fuktad trasa och oparfumerat handdiskmedel.	Torka av 1gång/vecka och vid behov		
PB 560 Covidien – luftinloppsfilter	MAH, ring så skickar de nya filter på posten.	Tvättas ej	Byts 1 gång/månad eller vid behov.		
PB 560 Covidien – Smoothbore andningssystem med exhalationvalve	MAH Art.nr: 5183064 Anmedic AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov.		
Bakteriefilter – närmast maskinen	MAH Art.nr: 342077 Philips AB	Tvättas ej	Byts var 14:e dag och vid behov. Beställs styckvis. Rekommenderat är att man beställer 6 st åt gången.		

TILLBEHÖR VENTILATOR Artikel	Förbrukningshjälpmedel i hemmet/Medicinsk apperatur i hemmet Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Ventilatorbord	MAH Art.nr: 003443 BREAS Medical AB	Endast ett bord per patient förskrivs.			
"Nya älgen" Slanghållare	MAH Art.nr: 150010 Anmedic AB	Dammtorkas			
Fukt/värmeväxlare-Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 Timik AB	Tvättas ej	Bytes 1 gång/dag och vid behov		
Vridbart knä	MAH Art.nr: 1897 Anmedic	Tvättas dagligen med ljummet vatten, oparfumerat handdiskmedel och kompresser.	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		
Vridbart knä med porthatt	MAH Art.nr: 1898 Anmedic AB	Tvättas dagligen med ljummet vatten, oparfumerat handdiskmedel och kompresser.	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		

AEROGEN Artikel	OneMed/Hjälpmedelcentral Artikelnummer	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Nebulisatorkammare Aerogen, enpatients 10 frp	MAH Art.nr: AG-AS3200 Dolema AB	Efter användning nebulisera igenom ca 1ml natriumklorid, skölj sedan med vatten och låt torka.*	Vid användning upp till 4ggr/dag byts kammaren 1gång/månad vid användning mer än 4ggr/dag byts kammaren var 14:e/dag.		
T-stycke (vuxen) till Aerogen (22M, 22F) 10-pack	MAH Art.nr: AG-AS3010 Dolema AB	Efter användning skölj igenom med vatten och låt torka.*	Byts i samband med byte av nebulisatorkammare.		
Filter- Vid inhalation med passivt slangset från Philips	FHH Art.nr: 1341007S Meteko Instrument AB	Tvättas ej	1 gång/dag	Filter PS-6020	
Flexslang böjbar isokoppling id 15mm/22mm längd 7-16cm veckad insida	FHH Art.nr: 332/5666 Medtronic AB	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1gång/vecka. Om patienten inhalerar ofta kan det behövas fler flextuber i bruk.*	Freeze-flex 9070	
Spruta injektion 3-komponent luer 10 ml centrerad, 0,2 ml gradering	FHH Art.nr: 307736 Becton Dickinson AB	Tvättas ej	Byts 1ggr/dag		
Natriumklorid 10 ml	Förskrivs av läkare och hämtas på apotek				

BEFUKTARE FISHER & PAYKEL MR810	Artikelnummer OneMed/Hjälpmiddelscentral	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Fisher & Paykel befuktare MR810	MAH bistår med teknisk support av utrustningen. .		Fuktdammas en gång per vecka.		
Befuktningskammare vuxna	MAH Art.nr. HC300 Fisher & Paykel Healthcare AB	Koppla bort huvudströmmen. Tvätta med vatten och oparfymrat handdiskmedel en gång per vecka. Skölj noggrant.	Rengör vattenbehållaren med vatten efter varje användning. Slangen mellan ventilatorn och befuktaren skall tvättas en gång per vecka och byts ut efter sex månader och vid behov.		
Uppvärmd slangkrets. Evatherm för MR810	MAH Art.nr. 900MR810 Fisher & Paykel Healthcare AB	Skölj igenom slangen med kranvatten och låt torka.	Sköljs igenom en gång per vecka och byts ut efter sex månader och vid behov.		
Whisper swivel II Utandningsventil	MAH Art.nr: 332113 Philips AB	Skölj igenom med kranvatten och låt torka.	Sköljs igenom en gång per vecka och byts ut efter sex månader, i samband med slangbyte, och vid behov.		
Fukt/värmeväxlare- Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 GE Healthcare	Utan filter.Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka helt innan nästa användning.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1 gång/vecka och vid behov.*		
Flexslang böjbar isokoppling id 15mm/22mm längd 7-16cm veckad insida	FHH Art.nr: 332/5666 Medtronic AB	Efter användning skölj igenom flextuben med vatten och låt torka helt innan nästa användning.*	Ha 2 st i ruljans och byt dessa 1 gång/vecka och vid behov.*	Flextub 557033300	

REVIVATOR/ ANDNINGS-BALONG Artikel	Artikelnummer OneMed/Hjälpmiddelscentral	Skötsel och rengöring	Bytesfrekvens/rengöring	Ersätter tidigare produkt och artikelnr	Bild
Fukt/värmeväxlare-Edith Flex	FHH Art.nr: 557044500 GE Healthcare	Tvättas ej	Bytes efter användning av andningsbalong		
Vridbart knä	MAH Art.nr: 1897 Anmedic	Rengörs med oparfymrat handdiskmedel, ljummet vatten och kompresser.*	Bytes vid slitage eller när den är trasig.		
Andningsballong	NRC förskriver Ambu Spur II från hjälpmiddelscentralen. Denna är patientbunden. Art.nr: 325003000	Tvättas ej	Funktionskontroll dagligen. Förvaras i originalpåse, torkas av efter användning.		

\* NRC's riktlinjer